



## Fordeler ved bruk av Cochlear Baha Remote Control 2

- Gjør at du diskret kan justere din Baha lydprosessor
- Har store knapper for enkelt valg av lydstyrke eller program
- Lar deg overvåke din eller ditt barns lydprosessor
- Gjør det enkelt å strøkke til annet trådløst tilbehør

**Merk:** Baha Remote Control 2 kan pares med to Baha 5 lydprosessorer for dem som har bilateral tilpasning.



## Produktoversikt

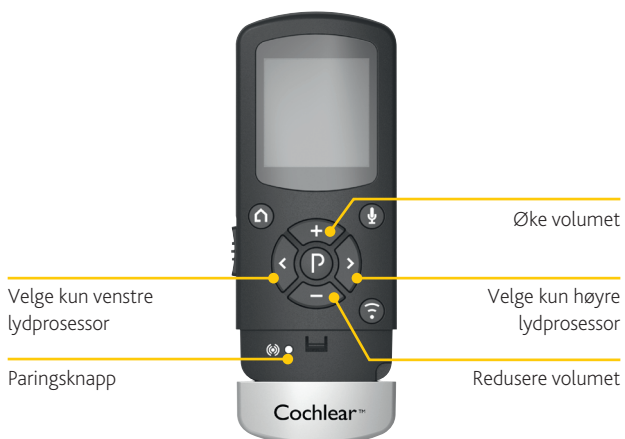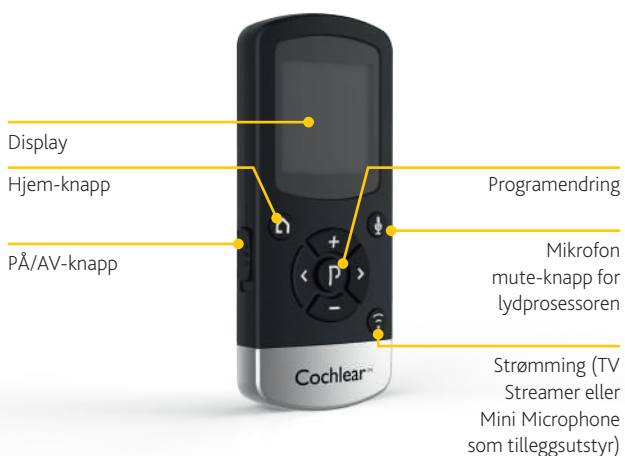

## Komme i gang

Kontroller med audiografen om din lydprosessor er parert med din Remote Control 2. Det er ikke nødvendig å pare forhåndsparerte lydprosessorer på nytt. Hvis din lydprosessor ikke er forhåndsparert, finner du forklaring på hvordan du enkelt parer den med din Remote Control 2 på siste side i denne veiledningen.

## Lade batteriet

Batteriet må være fulladet før du kan bruke Remote Control 2. For å lade den, plugges du i ladekabelen som vist til høyre. Deretter plugges du den andre enden i en stikkontakt. Under lading vises det en, to og tre streker kontinuerlig i batterimåleren. Når det er fulladet, vises alle tre streker kontinuerlig.




## Hvordan bruke Remote Control 2

### Hvordan slå din Remote Control 2 PÅ og AV

For å slå PÅ Remote Control 2, skyver du bryteren på siden av Remote Control 2 ned til PÅ-stilling. Det vises et hvitt "I"-ikon nederst på bryteren, og displayet slås på.

For å slå Remote Control 2 AV, skyver du PÅ/AV-bryteren opp til AV-stilling.

### Aktivere strømning

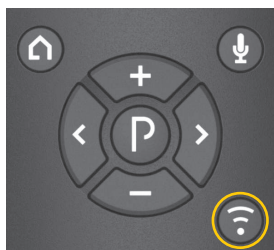

Hvis lydprosessoren din er parett med flere enn ett trådløst tilbehør, trykker du en, to eller tre ganger for å veksle mellom de ulike tilbehørsenhetene. Hvis du ikke får koblet til det trådløse tilbehøret, må du flytte deg nærmere og prøve igjen.



Tilkoblet strømmingsenhet.




Ingen strømmingsenhet funnet.


### Veksle mellom sider



Velg venstre eller høyre lydprosessor hvis du bruker to lydprosessorer.

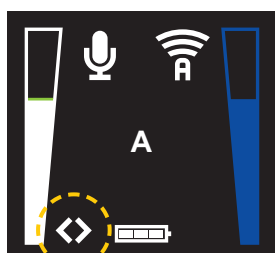

Volum for venstre og høyre lydprosessor valgt.

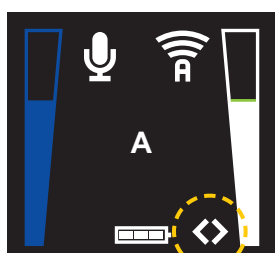

Venstre og høyre strømmingsvolum valgt.

### Deaktivere strømning

Hjem: Slutt å strøme og gå tilbake til program 1 og standard voluminnstillinger



Slutt å strøme og gå tilbake til siste brukte program og voluminnstillinger


### Remote Control 2 viser

Batteriene i Baha lydprosessorer er nesten utladet og må skiftes.




I venstre lydprosessor.

I høyre lydprosessor.

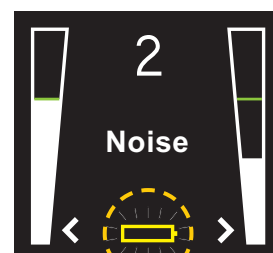

Batterispenningen i Remote Control 2 er lav, og batteriet må lades.

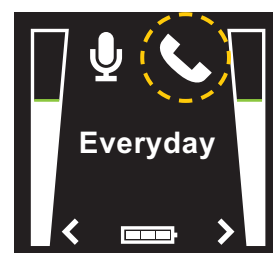

Phone Clip er aktiv.


## Pare med din Baha lydprosessor

Påse at Remote Control 2 er fulladet og slått PÅ.

- A** Slå av din Baha lydprosessor ved å åpne batteridekselet.



- B** Trykk én gang på paringsknappen på Remote Control 2 med spissen på en penn eller liknende.

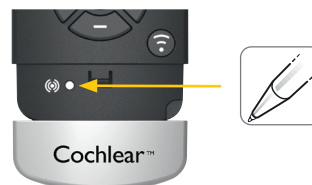

- C** "Søkeikonet" vises på skjermen, og Remote Control 2 er nå i paringsmodus i 20 sekunder.



Søker etter begge lydprosessorer.


- D** Mens paringsmodus er aktivert, slår du på lydprosessoren ved å lukke batteridekselet.



- E** Vellykket paring indikeres av en hørbar melodi i lydprosessoren.



- F** Søke og koble til lydprosessorer.

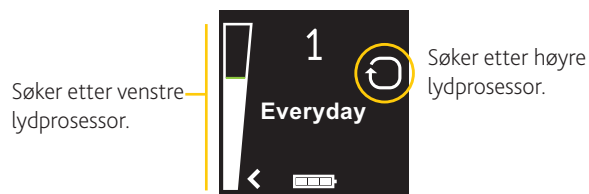

**Merk! Gjenta punkt A til F hvis du har to lydprosessorer.**


## Hjelp

For fullstendig informasjon om Cochlear Baha Remote Control, se bruksanvisningen.

For fullstendig informasjon om Cochlear Baha lydprosessor, se bruksanvisningen del A.

 Cochlear Bone Anchored Solutions AB Konstruktionsvägen 14, 435 33 Mölnlycke, Sweden  
Tel: +46 31 792 44 00 Fax: +46 31 792 46 95

[www.cochlear.com](http://www.cochlear.com)

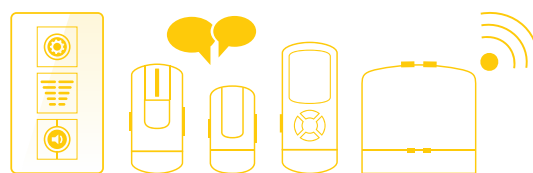

Gå inn på [www.cochlear.com](http://www.cochlear.com) for å få vite mer om vårt komplette utvalg av apper og trådløst tilbehør.